


エリプタ 各部位の名称 (薬品名:レルベア、アノーロ、エンクラッセ)

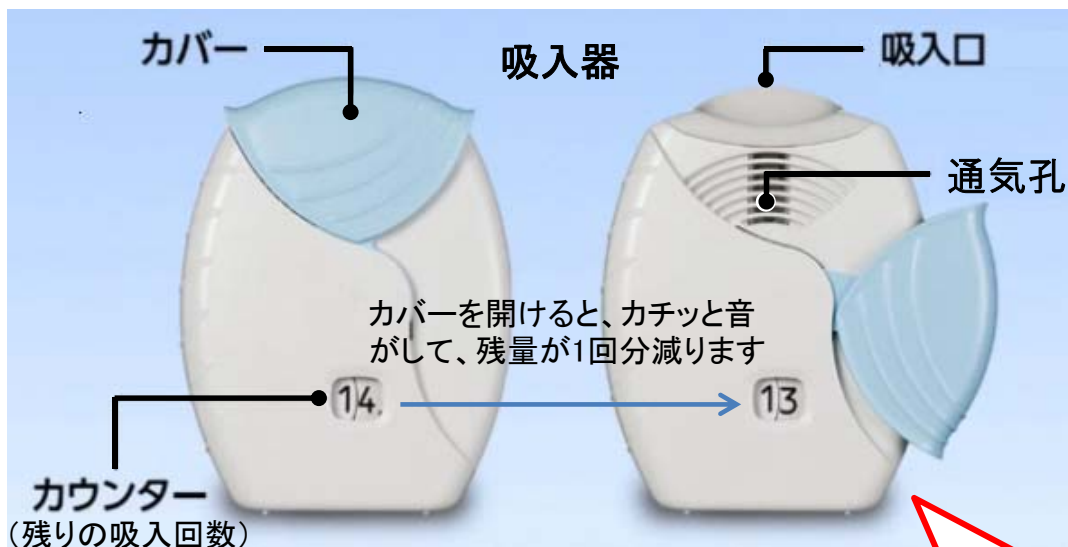

<閉じた図>

<開いた図>

カチッと音がするまで開けないと、薬がきちんと充填されません。

エリプタの保管上の注意 (薬品名:レルベア、アノーロ、エンクラッセ)

湿気に弱いので、使用直前に取り出します。

保管上の注意

- 包装トレイは、使用直前に開封して下さい
- 包装トレイを開封後は、6週間以内に使用し、薬が残った場合は保管しないで廃棄して下さい
- 高温多湿のところを避けて、室温で保管して下さい



包装トレイ
(レルベア)

開封して取り出す



レルベア



アノーロ



エンクラッセ

エリプタの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:レルベア、アノーロ、エンクラッセ)

- ※ 吸入操作練習用具(笛付)でホイッスル音の確認をします
- ※ カバーを開けたら、振ったり叩いたりしないで下さい

ホイッスル音が鳴ると、ちょうど良い吸入速度です。その感覚を覚えてもらいましょう。鳴らない時は、吸入速度が足りませんので、疑義照会をして下さい。

①薬の準備

- カウンターで残量を確認します
- カウンターを手前にして、カバーを開けます
(カチッと音がして、カウンターの残量が1つ減ったことを確認)

カウンターが“0”になってもカバーは開きますが、薬剤は残っていません。

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐き出します
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

息吐きをしないと、吸入が上手にできません。十分に息吐きができているか、確認します。

③吸入

- 吸入口をくわえ、深く息を吸い込みます

通気孔を指や唇で塞がないように指導します。

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます

肺内への薬剤の沈着率を高めるため、息止めが必要です。但し、無理はさせないこと。

- 吸入できていると、わずかな甘味や粉感を感じます。感じない場合はカバーを動かさずそのまま②~⑤を行います。
- また、粉の量が多いため、1回で吸えたか心配な場合も、カバーを動かさずそのまま②~⑤を行います。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

⑥後片付け

- 使用後はカバーを閉めます

カバーを閉める前に、吸入口を拭くように指導します。

※もう1回吸入をする場合

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嘔声などの副作用を防止するため、吸入後すぐにうがいを行います。それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいをを行うように指導します。